



Breakthrough™ 2 Marker
Microcatheter

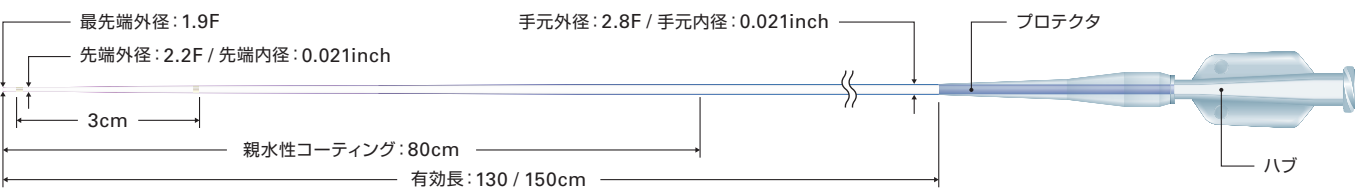


カタログ番号	品 名	最先端部外径 / 内径 (F / inch)	全長 (cm)	先端形状	X線不透過 マーカ数	デッドスペース ボリューム
M00139450070	Breakthrough 2 Marker	1.9 / 0.021	130	ストレート	2	0.40mL
M00139450080	Breakthrough 2 Marker	1.9 / 0.021	150	ストレート	2	0.45mL
M00139450090	Breakthrough 2 Marker	1.9 / 0.021	130	アングル	2	0.40mL
M00139450110	Breakthrough 2 Marker	1.9 / 0.021	150	アングル	2	0.45mL

シェイピングマンドレルを同梱

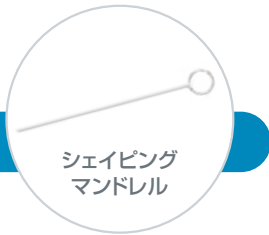

Detachable
Coils


for Breakthrough 2 Marker

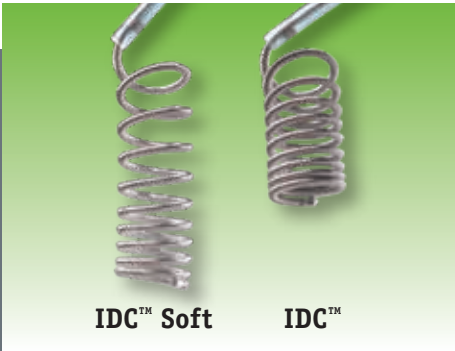

コイルデタッチの
メカニズム



① コイルデタッチ前

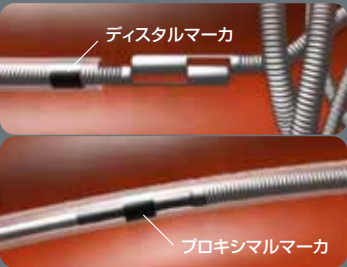

② コイルデタッチポイント



③ コイルデタッチ後

径表示換算目安: 1mm=3French=0.0394inches

販売名: マイクロカテーテル2
医療機器承認番号: 21700BZZ00471000
製造販売業者: 株式会社ハイレックスコーポレーション

販売名: Fibered IDC コイル
医療機器承認番号: 22100BZX01103000

販売名: プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム
医療機器承認番号: 21000BZY00328000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston
Scientific
Advancing science for life™

販売元:
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

PI-1181816-AB (ODP)

Boston
Scientific
Advancing science for life™

Breakthrough™ 2 Marker
Microcatheter



Stability & Access for Coiling

Breakthrough™ 2 Marker

Microcatheter



Stability & Access for Coiling

Coil留置時の安定性と選択性にフォーカスした
新型 2 Marker マイクロカテーテル

キックバックを低減したシャフト構造

手元部の高いサポート力と
先端部の操作性により
安定したデバイスデリバリーを実現。
特にCoil塞栓時の
キックバックの低減を目指しました。





広い内腔とシャフトバランスでファイバー付コイルでも
安定したデバイスデリバリーが期待されます

最先端径1.9Fの選択性

末梢への到達力を高めることを考えて手元部外径2.8F、先端外径2.2F、最先端外径1.9Fと
段階的に外形を変化させています。
先端形状はストレートタイプとアングル(45°)タイプをラインナップ。

Breakthrough™ 2 Marker

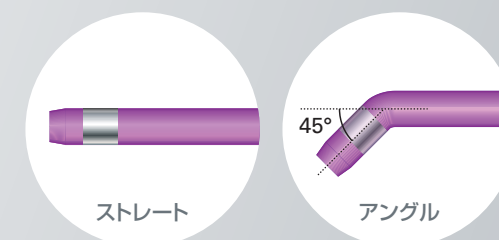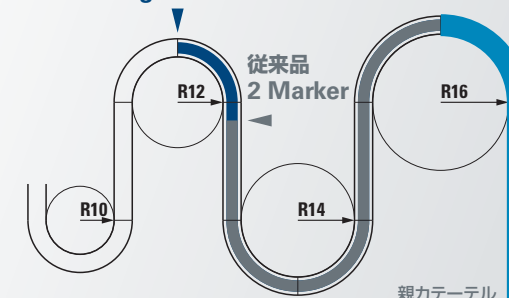

0.021inchの広い先端内腔

内腔はノンテーパーで多様なCoilに対応します。

Coil挿入時の視認性

ステンレスブレードと透明ハブの採用によって、
Coil挿入時の視認性を高めました。
複雑な病変へのアプローチにおいても容易な位置の把握が期待できます。

